

CELL GLOW v1

革新的な家庭用美容機器で、プロフェッショナルな水光ケアをご自宅で実現します。本マニュアルでは、機能と操作方法を詳しくご説明いたします。

家庭用美容機器

医療機器ではありません



製品の主な構成



本体システム

デジタルディスプレイ搭載の充電ベース、電源スイッチ、ICカードリーダーを備えた高性能な制御システムです。



微晶ヘッド

美容液を効果的に肌に導入する専用ヘッド。使用後は消毒して保管してください。



ハンドル

人間工学に基づいた設計で、快適な操作性を実現。エッセンスボトルと微晶ヘッドを装着します。



エッセンスボトル

オイルフリー、アルコールフリーの美容液または凍結乾燥粉末専用のボトルです。



製品仕様と技術パラメータ

基本仕様

- 製品型番: CELGLOW v1
- 製品名:
- 重量: 2 KG
- サイズ: 31×27×12cm
- 定格周波数: 50 HZ

電源と制御

- 定格電圧: 110V~220V選択可能
- 定格電力: $\geq 36W$
- 制御出力: 導入量調節、推進周波数調節

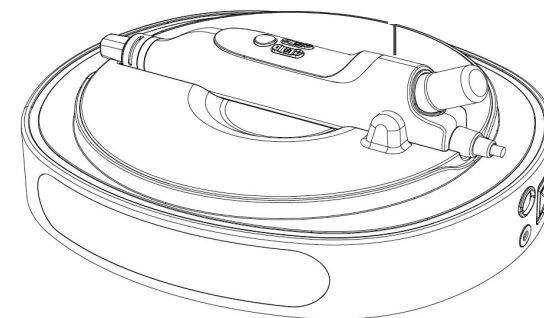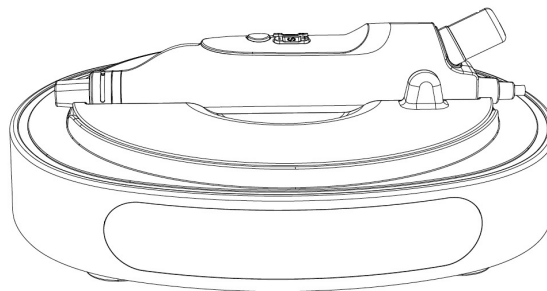

製品の使用手順

01

必要な付属品を準備

ハンドル×1、微晶ヘッド×1、赤色防漏シールリング×1、エッセンスボトル×1をご用意ください。

03

微晶ヘッドの接続

微晶ヘッドをハンドル導頭に垂直に合わせて挿入し、カードポイントまで回転させてロックします。軽く引いて抜けないことを確認してください。

02

シールリングの装着

赤色防漏シールリングを取り、ハンドル導頭の末端カードポイントに装着します。

04

エッセンスボトルの固定

エッセンスボトルをハンドル末端の凹部(接続線側)に装着します。ボトルを軽く振って緩みがないか確認し、液体漏れのリスクがないことを確認してください。

使用前の準備とクリーニング



肌のクレンジング

洗顔料で顔を徹底的にクレンジングし、表皮の汚れを除去して水分を拭き取ります。



機器の消毒

75%アルコール綿で微晶ヘッドとハンドルを拭いて消毒します。



美容液の選択

オイルフリー、アルコールフリーの美容液または凍結乾燥粉末のみ使用可能です。オイル類やスクラブ製品は使用禁止です。

- ☐ **クリーニングモード:** 使用前後に必ず実施してください。エッセンスボトルに生理食塩水または純水を入れ、「Clean」ボタンをクリックして15秒間の自動洗浄を開始します。

操作設定と推奨パラメータ

基本設定

デフォルト設定:

- 時間: 30分
- E強度: レベル1
- S速度: レベル1
- D用量: レベル1

推奨パラメータ

全顔操作の場合:

- 使用時間: 10-15分
- E強度: レベル3以上
- S速度: レベル3以上
- D用量: レベル2以上

1

パラメータ調整

「+」「-」ボタンで各パラメータを調整します。

2

起動

「Start」ボタンをクリックし、ハンドルの開始キーを押して正式に起動します。

正しい操作手法

1 基本的な動き

下顎ラインから耳の後ろに向かって直線的にリフトアップしながら導入します。

2 重点ケア部位

法令線、目の周り、シミ、毛穴の粗い部分などには10秒間留めて浸透を強化します。

3 避けるべき部位

まぶた、開放性の傷、炎症部位は避けてください。

使用後のケアとメンテナンス

1

アフターケア

湿布修復マスクを貼るか、鎮静クリームを15分間塗布します。

2

パイプの洗浄

クリーニングモードを繰り返してパイプを洗浄します。

3

消毒と保管

微晶ヘッドを消毒し、乾燥させて保管します。

日常メンテナンス

保管環境は温度10-40℃、湿度≤80%、換気の良い無塵環境を保ってください。毎週、微晶ヘッドを取り外して柔らかいブラシで残留物を清掃してください。

安全禁忌事項と警告

使用禁止対象者

- 妊婦、授乳期の女性、18歳未満の青少年
- 心臓病・てんかん患者、体内に金属インプラント(心臓ペースメーカー、鋼釘など)がある方
- 皮膚損傷、湿疹、酒さなど炎症期の患者

使用禁止シーン

- 日焼け後・美容医療術後7日以内
- ピーリング・レチノール使用期間中
- 生理期間、発熱、感染または凝固機能障害期間

操作禁忌

- 稼働中の機器をアルコール・アセトンで清掃禁止
- 可燃環境、強磁場、湿気の多い高温環境での使用禁止
- 宝飾品、金属物品、粘膜部位への接触禁止

トラブルシューティングと保証

よくある問題と対処法

- **電源が入らない:** 電源プラグの接続、コンセントの電力、電源コードの破損を確認してください
- **使用後の赤み:** 操作力が強すぎる、または美容液アレルギーの可能性あります。3日間休止し、冷湿布で修復してください
- **液体が出ない:** 電源線の緩み、設定時間の終了、電圧不足を確認してください

製品保証

保証期間は機器アクティベーション日から起算されます。有効な購入レシートと保証カードの提示が必要です。

消耗品(微晶ヘッド、ICカード)および贈品は保証対象外です。

- 重要なお知らせ:** より安全で効率的にご使用いただくため、専門スタッフによる指導トレーニングを受けることをお勧めします。ご不明な点がございましたら、アフターサービススタッフまでお問い合わせください。